

NUEVO

DRI-CHEM NX10N

Analizador de química clínica para la concentración de amoníaco

Analizador ligero, compacto y de fácil operación



Analizador ligero y compacto para análisis de sangre total
-en casos de emergencia

Solución Point of Care para analizar NH₃ en sangre entera
ideal para salas de emergencia

En 2 minutos se adquieren los resultados de la prueba
NX ION ofrece un procesamiento rápido para adaptarse a pruebas
urgentes de amoníaco en sangre. Con una operación fácil, es posible
obtener el resultado en solo unos 2 minutos después de comenzar
la prueba.

Análisis en sangre total adecuado para análisis urgentes
NXION es un analizador que permite realizar pruebas inmediatas
utilizando la sangre recién recolectada, requiriendo solo 10 µL
de muestra.



Solo 5 pasos de operación




1. Deslice la tarjeta QC



2. Coloque el slide NH₃



3. Coloque la muestra

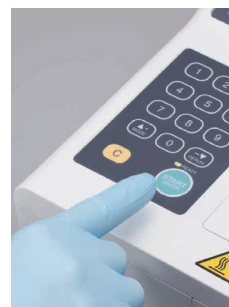

4. Presionar START



5. Resultados en pantalla

Amplio rango de medición

La precisión en las determinaciones está garantizada con el sistema de tarjeta QC en todo el rango de medición (7-357 $\mu\text{mol/L}$).

Peso reducido de 2,0 kg a 1,2 kg

Su compacto tamaño es adecuado para realizar análisis de sangre en diversos sitios clínicos, como salas de examen, salas de pacientes hospitalizados/ambulatorios y UCI.

Exportación de datos

Los datos obtenidos se pueden enviar a un sistema externo desde el puerto USB. También es posible ingresar la información del paciente mediante el uso del lector de código de barras.

Medida preventiva contra riesgos biológicos

Cuenta con una caja de eliminación para la prevención de infecciones. Los usuarios pueden desechar los slides usados sin tocarlos.



Consumibles (El empaque podría diferir ligeramente de las imágenes.)

Slides



Nota: La imagen de arriba muestra NH₃-WII slides para sangre entera

FUJIFILM NH3-WII (para sangre entera) 24 slides/caja
NH3-P11 (para plasma) 24 slides/caja

Puntas



FUJIFILM CLEAN TIPS
96 puntas x 6 racks/caja

Control de calidad



FUJIFILM CONTROL QN
3 ml x 2 botellas/caja

Accesorio Opcional Lector de código de barras



Dimensiones



Especificaciones

Slides	FUJIFILM DRI-CHEM SLIDE NH ₃ -WII (sangre entera) y NH ₃ -P11 (plasma)
Rango de medición	7- 357 $\mu\text{mol/L}$ (10-500 $\mu\text{g/dl}$)
Cantidad de muestra	10 μL
Tiempo de medición	2 minutos
Temperatura de incubación	37 °C
Fuente de luz	600 nm LED
Requerimientos eléctricos	DC 12V AC adaptador : AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6 A
Condiciones de operación	Temperatura: 15 to 32 °C, humedad: 30 a 80%RH
Dimensiones	160 (L) x 230 (P) x 93 (A) mm
Peso	1.2 kg
Comunicación externa	USB connection (virtual COM port RS232C)
Puertos de salida	USB Type A (para lector código de barras) USB Type B (para transmisión de datos)

Las especificaciones y la apariencia de los productos que se muestran en este folleto pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el sistema. Asegúrese de leer atentamente el manual de instrucciones para el uso adecuado del equipo.