

Medonic 
Hematology is in our blood


Un analizador de Hematología de 3 partes



* Aplican restricciones

- Procesa muestras capilares a partir de una gota de sangre
- Tecnología "Shear-valve" libre de mantenimiento
- Autocargador (Modelo M32S)
- Lider mundial en calidad

Serie M32 - Innovación construida sobre calidad total

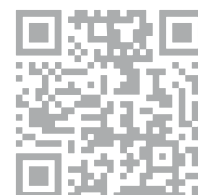

Innovación y Calidad

Único equipo que procesa muestras capilares (Pacientes pediátricos)

Ideal para niños, perfecto para bancos de sangre
Un pinchazo en el dedo es menos doloroso, el adaptador de micropipeta (MPA) es ideal para tomar y analizar muestras de sangre de niños y otros pacientes.

Para bancos de sangre, es la herramienta ideal para tomar desiciones rápidas de pre-donación de sangre.


La sangre del dedo es todo lo que necesita

1. Tome la muestra de sangre
2. Lleve 20 μ L a un microcapilar
3. Deslícelo en el adaptador
4. Insértelo en el analizador
5. Lea los resultados

Sin preparación, pre-dilución, tubos de aspiración ni agujas.



- Pantalla táctil a color WVGA de 7" con formato horizontal
- El diseño de su interfaz promueve una fluida operación y resultados de evaluación exactos
- Nuevo y poderoso software con menús fáciles para navegar y simples de comprender
- Iluminación suave y un diseño ergonómico que simplifica el manejo de las muestras
- Numerosas funciones innovadoras tras un moderno diseño azul
- El puerto USB es evidencia de las mejoras en la conectividad y comunicación

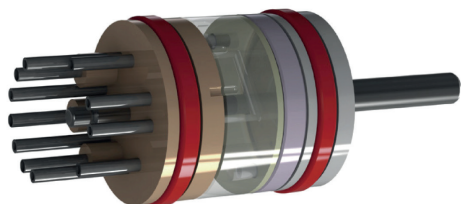

Tecnología "Shear-valve"

Medonic serie M-32, usa la mejor tecnología disponible para dar los mejores resultados a un bajo precio.

Obtendrá los siguientes beneficios únicos:

- Muestreo extremadamente preciso el cual da resultados más certeros
- Válvula completamente libre de mantenimiento
- 3 años de garantía

Características M32

Tubo mezclador incorporado
Adaptador para micropipeta (MPA)
"Shear valve" libre de mantenimiento
Modo de pre-dilución
Cap-piercing device (M32C)
Autocargador (M32S)

Especificaciones técnicas

Muestras por hora	60
Número de parámetros	20
Pantalla táctil	Color
Muestras en memoria	50,000
Software de QC	Si
Números de reactivos usados	2
Tiempo para resultado	< 50 segs.
Cv CGB	1.8%
Cv CGR	1.1%
Cv PLT	3.3%
Cv HCM	1.0%

